

## Materace próżniowe




### Vacuform® 2.0


- szybkie i bezpieczne unieruchomienie pacjenta w każdej wymaganej pozycji
- nawet duże przechyty stołu operacyjnego nie zmieniają ułożenia ciała pacjenta
- wygodny dostęp do pola operacyjnego
- bezpieczny transport pacjenta w określonej pozycji
- profilaktyka odleżyn i uszkodzeń nerwów




- forma materaca dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta
- odessanie powietrza stabilizuje pacjenta
- możliwość zmiany ułożenia pacjenta poprzez uwolnienie próżni w trakcie zabiegu operacyjnego
- optymalna redukcja ucisku powierzchniowego
- materac zbudowany z elastycznej i trwałej folii PUR - folia poliuretanowa (biokompatybilna)
- wypełnienie: mikrokulki styropianowe
- wolny od lateksu, PVC i DEHP (ftalanów)
- zawór powietrza obsługiwany jedną ręką, przystosowany do odsysania powietrza ssakiem chirurgicznym lub za pomocą ręcznych pomp próżniowych
- powierzchniowe czyszczenie i dezynfekcja
- wybrane modele dla pacjentów bariatrycznych
- możliwość stosowania w pracowni RTG, MRI, CT
- maty antypoślizgowe powinny być stosowane pod materacem chirurgicznym, gdy operacja wymaga przechylenia stołu operacyjnego np. pozycja Trendelenburga

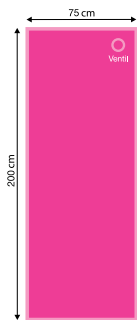


**Vacuform® 2.0**  
uniwersalny  
materac  
chirurgiczny  
75 x 200 cm # 34 66 105  
65 x 200 cm # 34 66 205  
100 x 200 cm # 34 66 104

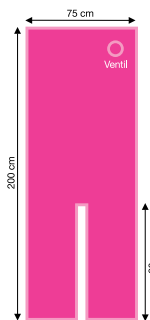


**Vacuform® 2.0**  
materac  
chirurgiczny  
dzielony podudzie i stopy  
75 x 200 cm # 34 66 505

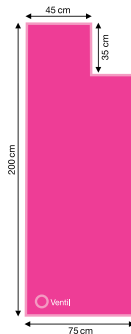


**Vacuform® 2.0**  
do operacji ramienia  
75 x 200 cm # 34 66 605  
w kpl. z poduszką  
35 x 30 cm # 34 66 605-k

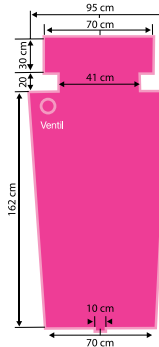


**Vacuform® 2.0**  
materac  
chirurgiczny do  
pozycji bocznych  
95/70 x 212 cm # 34 66 305

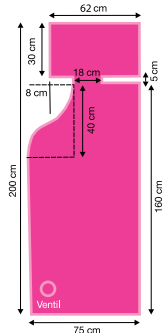


**Vacuform® 2.0**  
materac  
chirurgiczny do  
operacji ramienia  
75 x 200 cm # 34 66 405

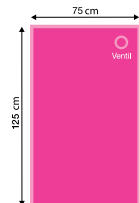

**Vacuform® 2.0**  
krótki materac  
chirurgiczny  
75 x 125 cm # 34 65 205  
100 x 100 cm # 34 66 005  
75 x 100 cm # 34 65 005

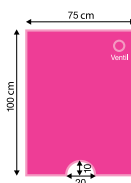

**Vacuform® 2.0**  
krótki materac  
chirurgiczny z wycięciem  
75 x 100 cm # 34 65 105  
75 x 125 cm # 34 65 305  
100 x 100 cm # 34 66 006

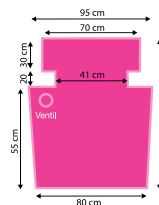

**Vacuform® 2.0**  
krótki materac  
chirurgiczny z wycięciem  
np. do operacji biodra  
w ułożeniu bocznym  
95/70 x 105 cm # 34 66 007



**Vacuform® 2.0**  
mata antypoślizgowa  
25 x 35 cm # 34 66 906



Wypełnienie  
mikrokulkami  
w stanie próżni

Wypełnienie  
konwencjonalne  
w stanie próżni

## AKCESORIA

- pompka ręczna
- zestaw naprawczy
- torba do przechowywania



Ułożenie  
mikrokulek  
bez próżni



Ułożenie  
mikrokulek  
w stanie próżni



Ułożenie  
konwencjonalnych  
kulek styropianowych  
bez próżni



Chotomowska 30  
05-110 Jabłonna, Poland

**M** +48 503 032 313  
**T** +48 22 782 44 74

**T** +48 22 266 84 95-96  
**F** +48 22 266 84 97

[info@empireum.com.pl](mailto:info@empireum.com.pl)  
[www.empireum.com.pl](http://www.empireum.com.pl)

[www.sklep.empireum.com.pl](http://www.sklep.empireum.com.pl)  
[www.medyczne24.pl](http://www.medyczne24.pl)